

Proposé par Viatris



Ne nécessite aucun compte utilisateur et se connecte uniquement en Bluetooth sur votre téléphone à proximité.

Nestor se glisse dans la poche et vous prévient dès que vous devez prendre vos médicaments. Pas besoin de téléphone portable, il est autonome une fois paramétré avec une grande autonomie.

Contact

Email:
contact@healysa.com

Aider les gens à s'épanouir grâce aux dernières technologies en matière de santé et de bien-être.



NESTOR NOTICE D'UTILISATION



NESTOR CARE



HEALYSA
CARE SOLUTIONS

1 - Télécharger l'application NESTOR CARE pour Android ou IOS.

2 - Lancez l'application NESTOR CARE depuis votre mobile ou tablette


3 - Allumez votre Pilulier NESTOR avec un appui long de 5 secondes sur le bouton central.

4 - L'application détecte et se connecte automatiquement au pilulier

5 - Synchronisez l'heure du pilulier en cliquant sur l'icône 

6 - Ajoutez un traitement en cliquant sur l'icône 


7 - Paramétrez votre traitement selon votre ordonnance médicale :

- Nom du médicament (Choix dans la liste déroulante)
- Choisir une couleur (Identique à celle du sticker sur la boîte)
- Sélectionnez le nombre de jour du traitement
- Sélectionnez le nombre de prise par jour
- Sélectionnez le nombre de comprimés par prise.
- Définissez les horaires de vos prises de médicaments.
- Transférez les données en cliquant sur l'icône 

Vous pouvez maintenant éteindre votre NESTOR avec un appui court de 2 secondes sur le bouton central.

L'observance peut commencer et votre pilulier sonnera aux horaires paramétrés et clignotera de la couleur sélectionnée correspondante à la couleur du sticker sur la boîte de médicaments ou de votre organiseur.

Fonctionnement

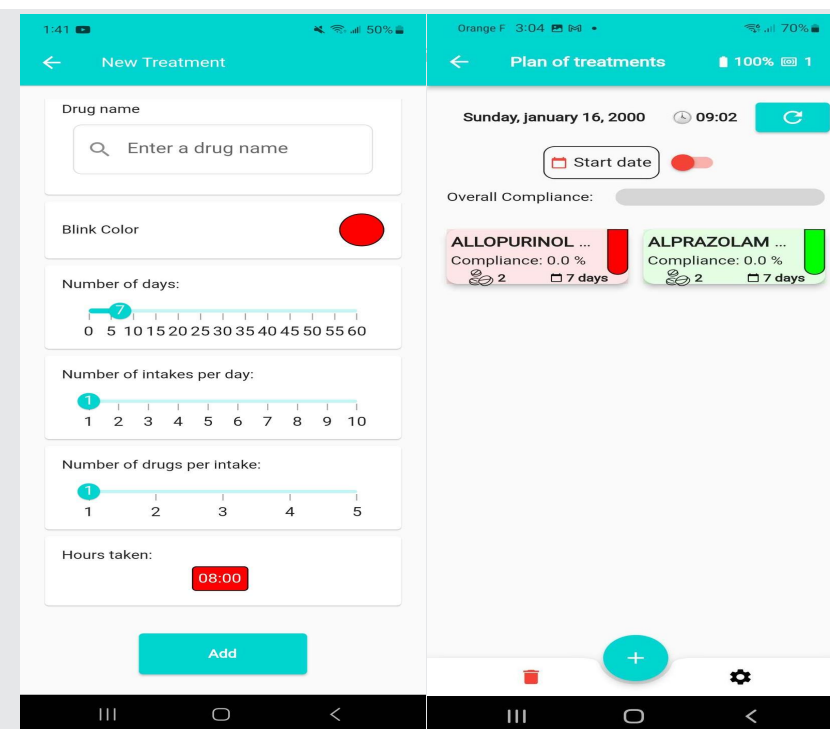

SPECIFICATIONS

Dimension : 4.80 x 4.80 x 1 cm

Poids : 18g

Piles : CR2032 x 2 (Autonomie 6 à 12 mois)

Led RGB x2

Bluetooth 4.0

Bouton Marche/Arrêt